

# AIBasedSegmenta

Соня Пуйоль, доктор філ.

30/06/2025

AI - Сегментація на основі 3D Slicer

# Manual vs AI-powered Segmentation

---

Натисніть кнопку «Додати дані» у вікні привітання  
Модуль Slicer

## **Slicer завантажує набір даних МРТ простати**

---

In the past decade, image segmentation has been powered by the development of deep learning algorithms (e.g. nnUNet by the German Cancer Research Center (DKFZ)/Helmholtz Research).

AI-powered segmentation tools can reduce the segmentation time and provide more reproducible results.

## AI Terminology

---

A is an AI algorithm that was trained to perform a specific task (e.g. brain tumor segmentation model).

The Weights of an AI model are small numbers that determine how much importance the model gives to different image features.

During the Training phase, a Model learns patterns from data labelled by experts and adjusts its weights to improve its predictions.

During the Validation/Test phase, the model is evaluated on a separate set of data not used during the Training phase.

During Inference, the model is applied to new datasets to perform the specific task it was trained for.

# 3D Slicer AI Workshop

---

This tutorial focuses on running inference tasks using various pretrained AI models for automated segmentation of anatomical and pathological structures.

# MONAIAuto3DSeg Slicer extension

---

This tutorial uses the pre-trained models of the MONAIAuto3DSeg Slicer extension.

The tool is designed to work on laptops or on average desktop computer without a GPU.

# MONAIAuto3DSeg Slicer extension

---

Натисніть кнопку «Створити нову сегментацію» на сторінці «Застосувати»

# Slicer AI Tutorial: Segmentation

## Tasks

---

Segmentation Task #1: Prostate.

Segmentation Task #2: Brain Glioma.

Segmentation Task #3: Whole Body Segmentation.

Slicer показує  
результат сегментації  
простати на основі  
штучного інтелекту

# Завантаження

## dataset4\_BrainMRI\_Glioma


---

AI-based Segmentation of Peripheral Zone (PZ) and Transition Zone (TZ) of the prostate on T2-weighted MRI Images.


Dataset:


msd\_prostate\_01-t2


msd\_prostate\_01-adc

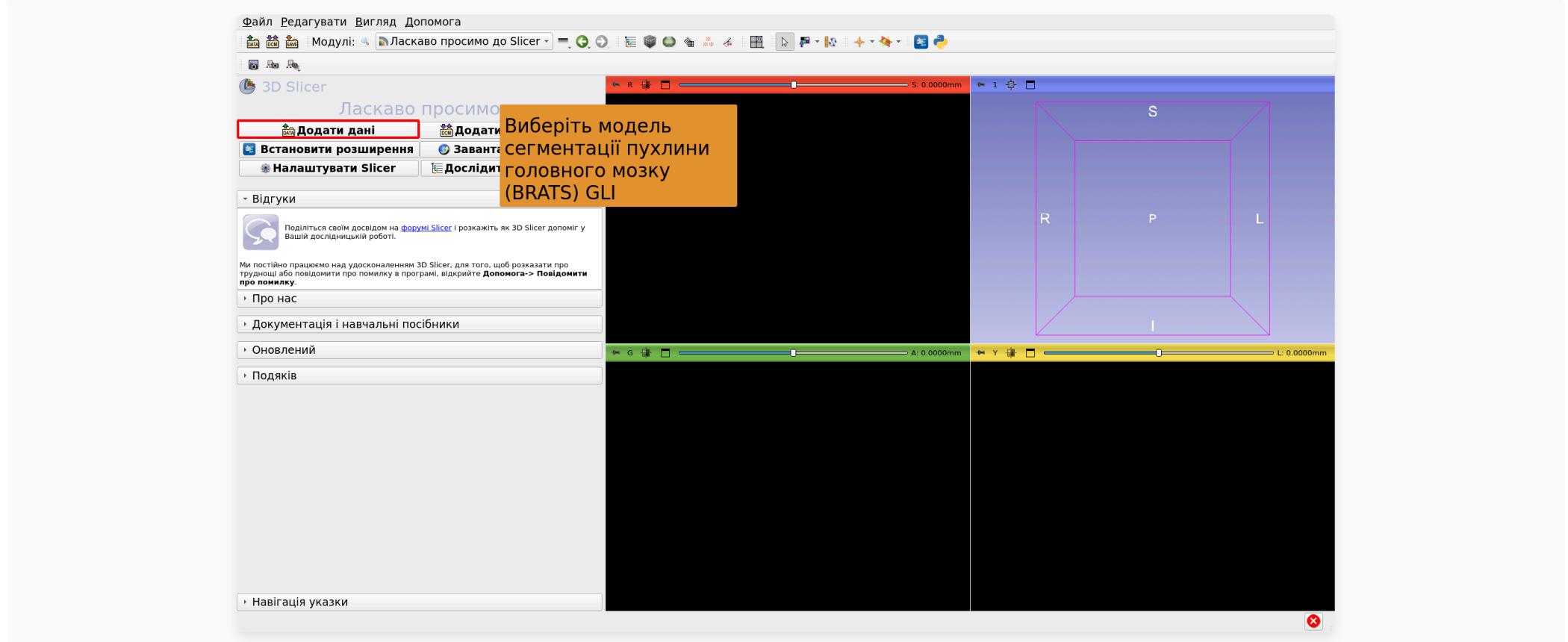

**Введіть вхідні  
об'єми наступним  
чином:**  
**Вхідний об'єм T2F:  
BraTS-GLI\_00005-000-t12f**  
**Вхідний об'єм T1C:  
BraTS-GLI\_00005-000-t1c**  
**Вхідний об'єм T1N:  
BraTS-GLI\_00005-000-t1n**  
**Вхідний об'єм T2W:  
BraTS-GLI\_00005-000-t2w**  
Натисніть  
«Створити нову  
сегментацію» на  
кнопці  
«Застосувати»  
Натисніть  
«Застосувати», щоб  
розпочати  
сегментацію

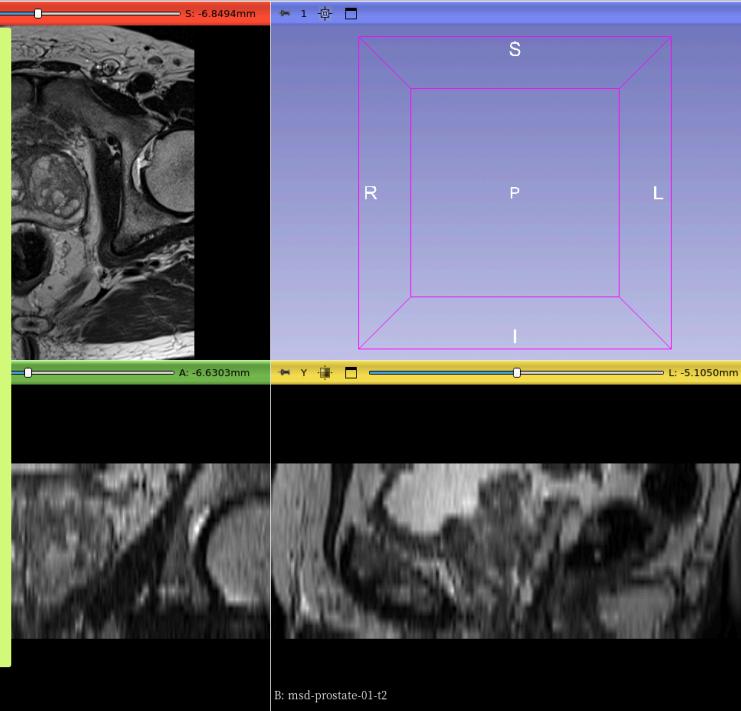


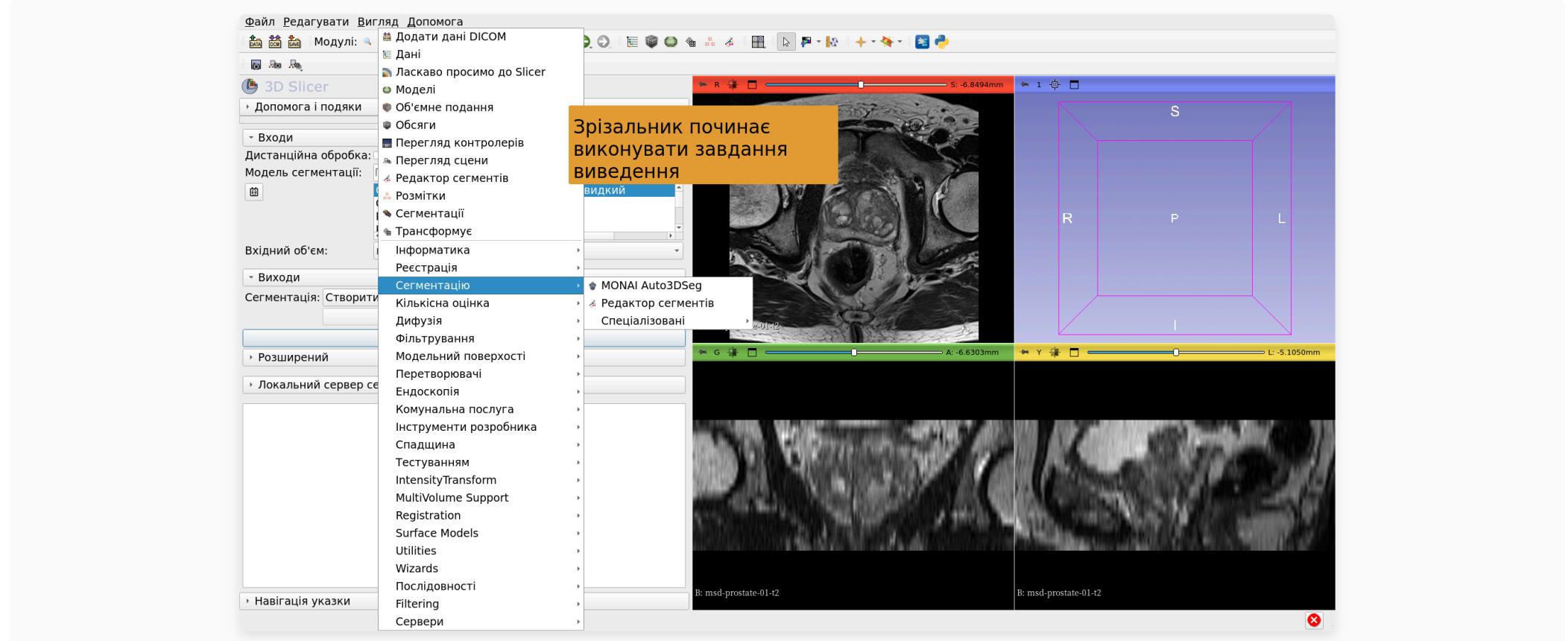


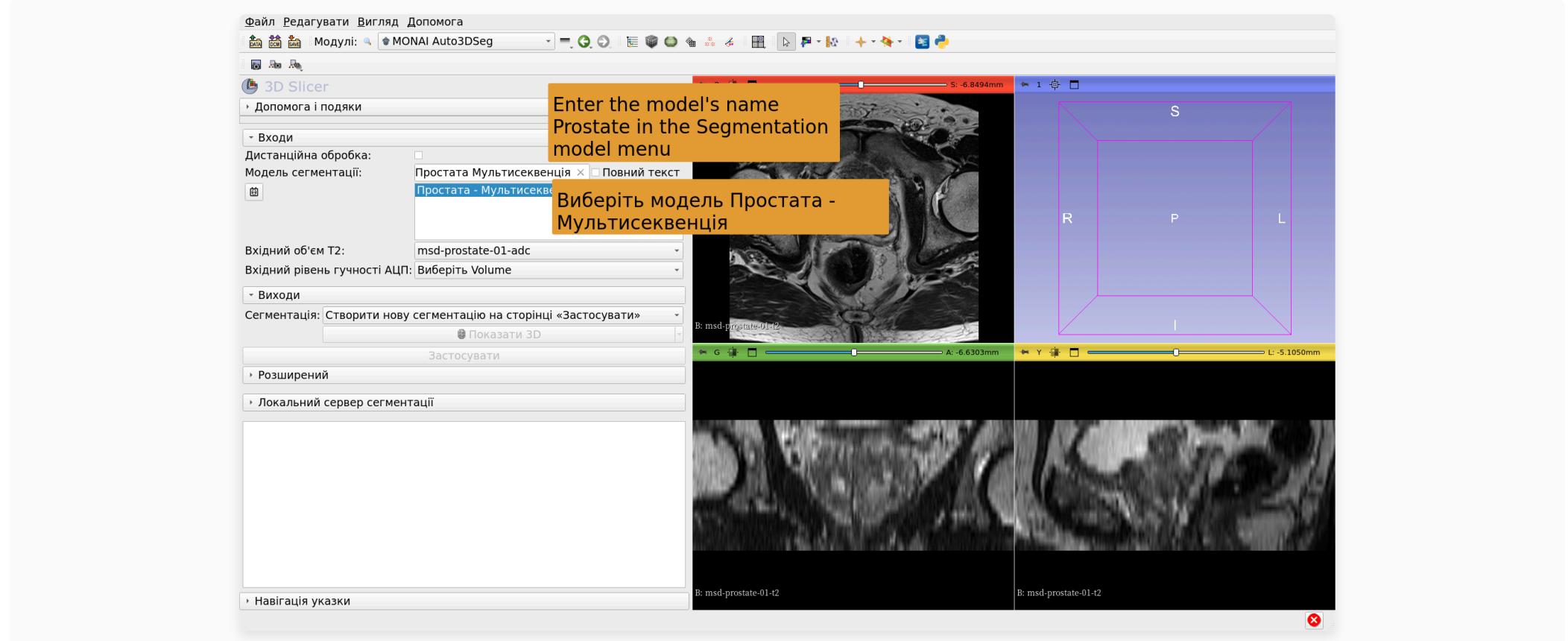


У модулі «Додати дані DICOM»  
виберіть пацієнта patient1 та  
двічі класність на зображені  
CT\_Thorax\_Abdomen, щоб  
завантажити його в  
Slicer

Click on Create new  
segmentation on Apply

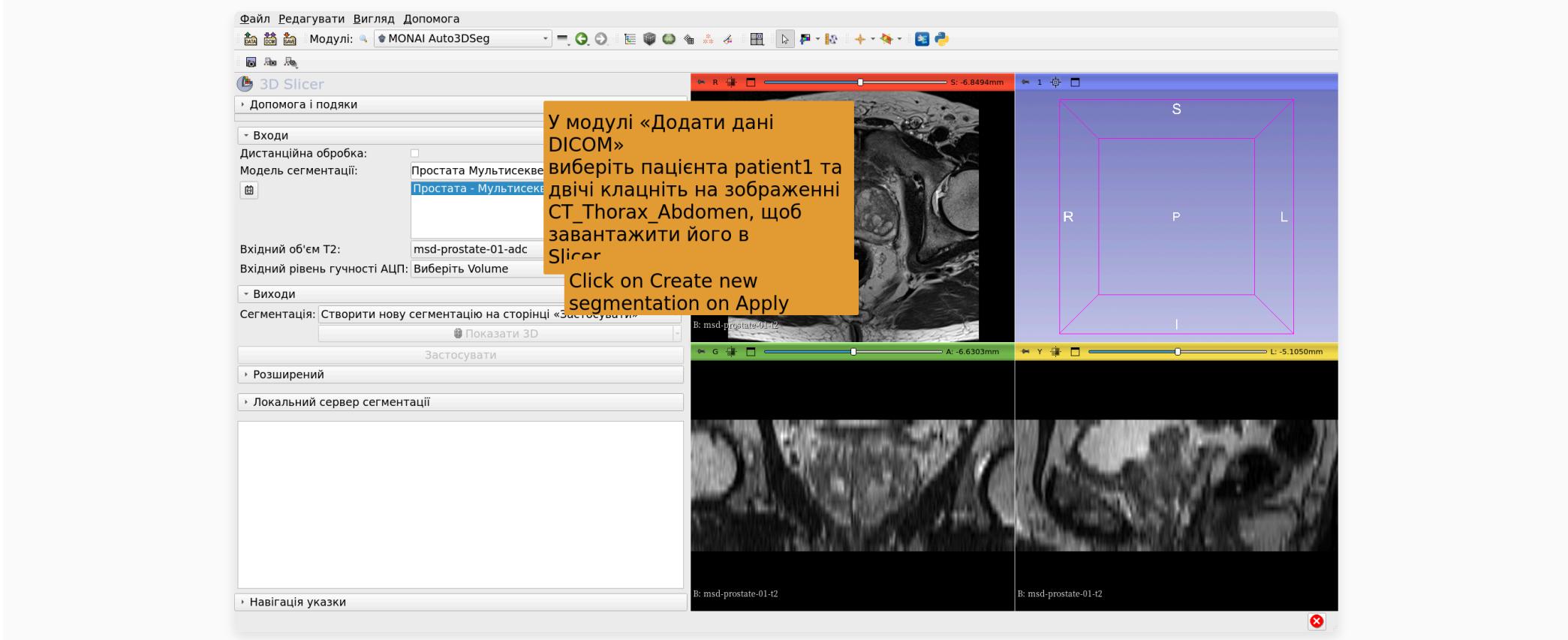

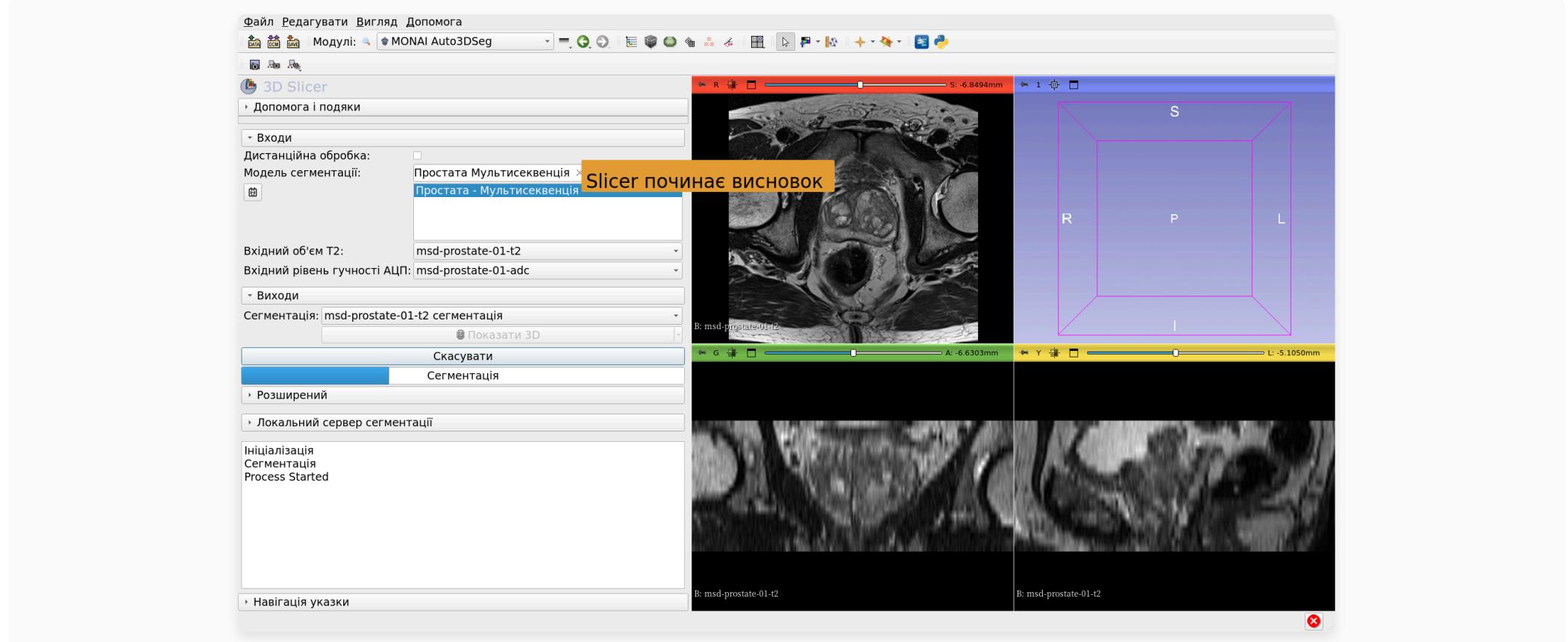

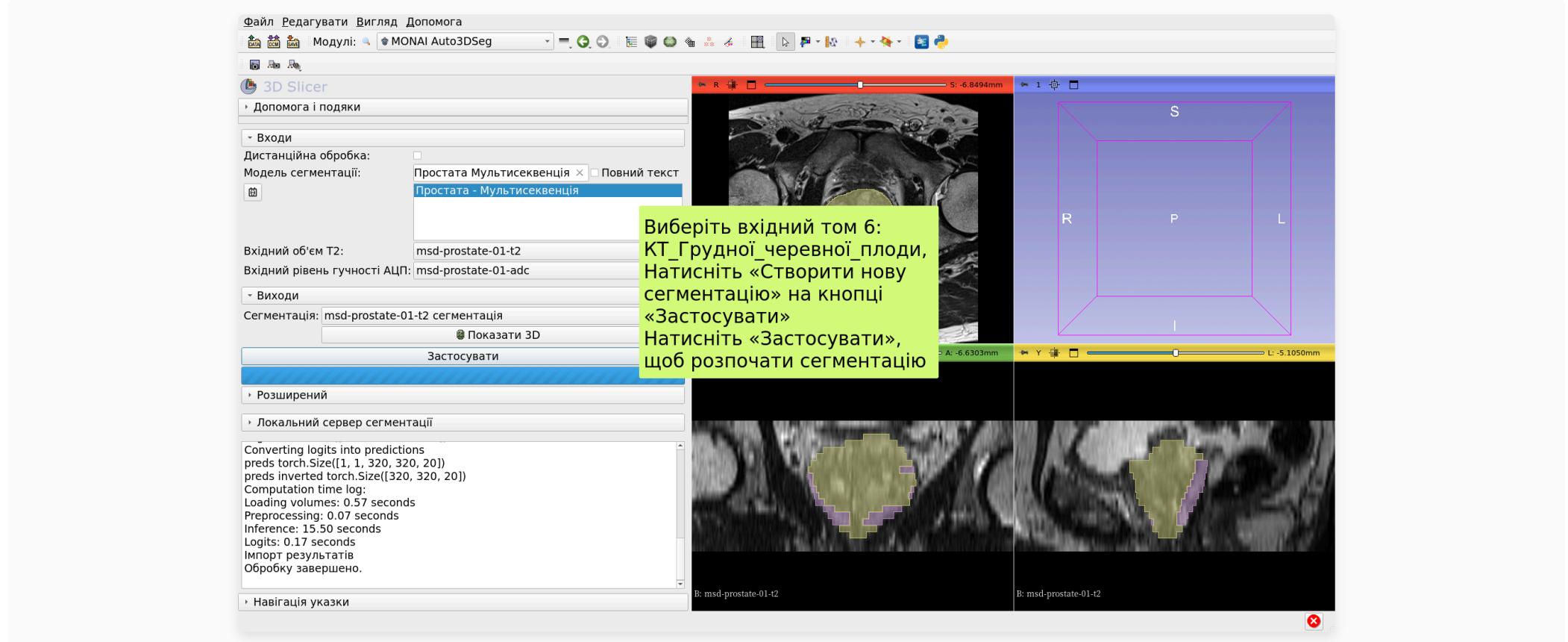

# AI Segmentation Task #2: Brain Glioma


# **Зріз відображає результат сегментації на основі штучного інтелекту за допомогою швидкої сегментації всього тіла TS1**


---


AI-based Segmentation of Neoplasm, Necrosis and Edema in Brain MRI images.


Datasets:


- 1) BraTS-GLI\_00005-000-t1n (T1-weighted)
- 2) BraTS-GLI\_00005-000-t1c (T1-weighted post-Gd)
- 3) BraTS-GLI\_00005-000-t2w (T2-weighted)
- 4) BraTS-GLI\_00005-000-t2f (T2-FLAIR )

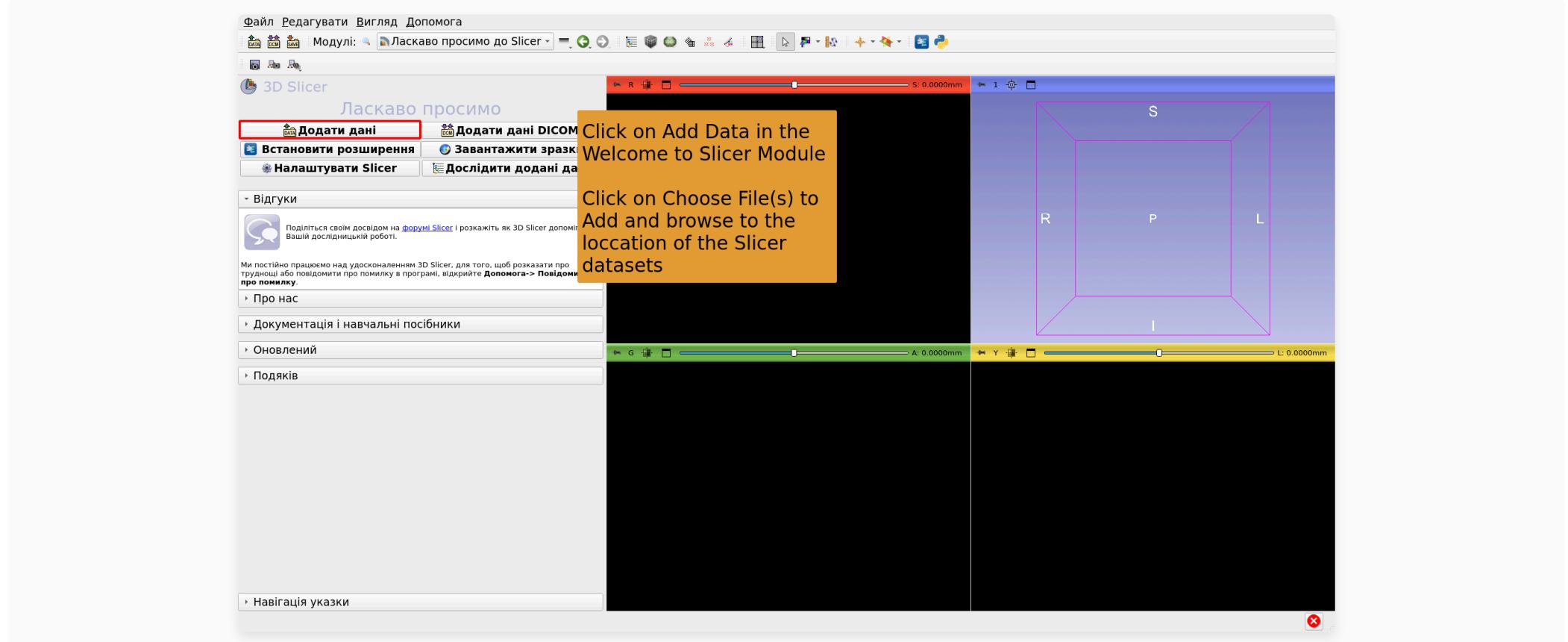

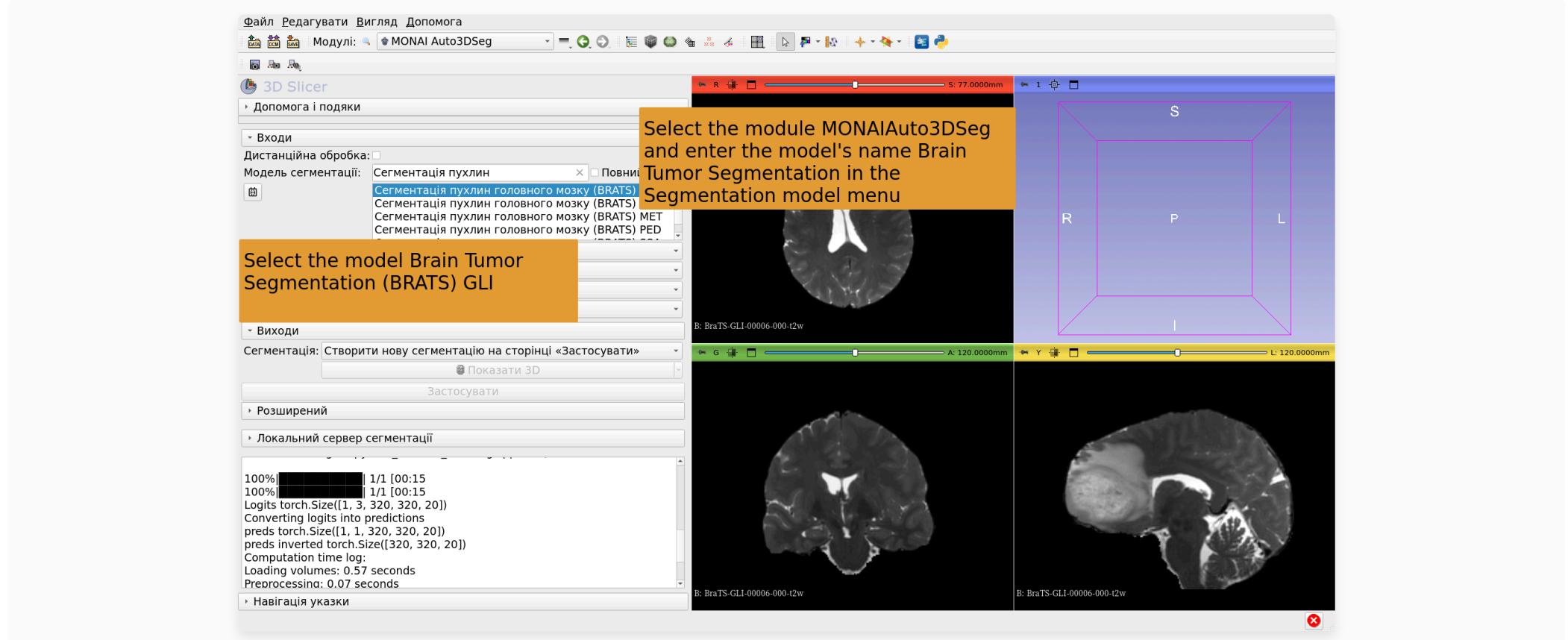

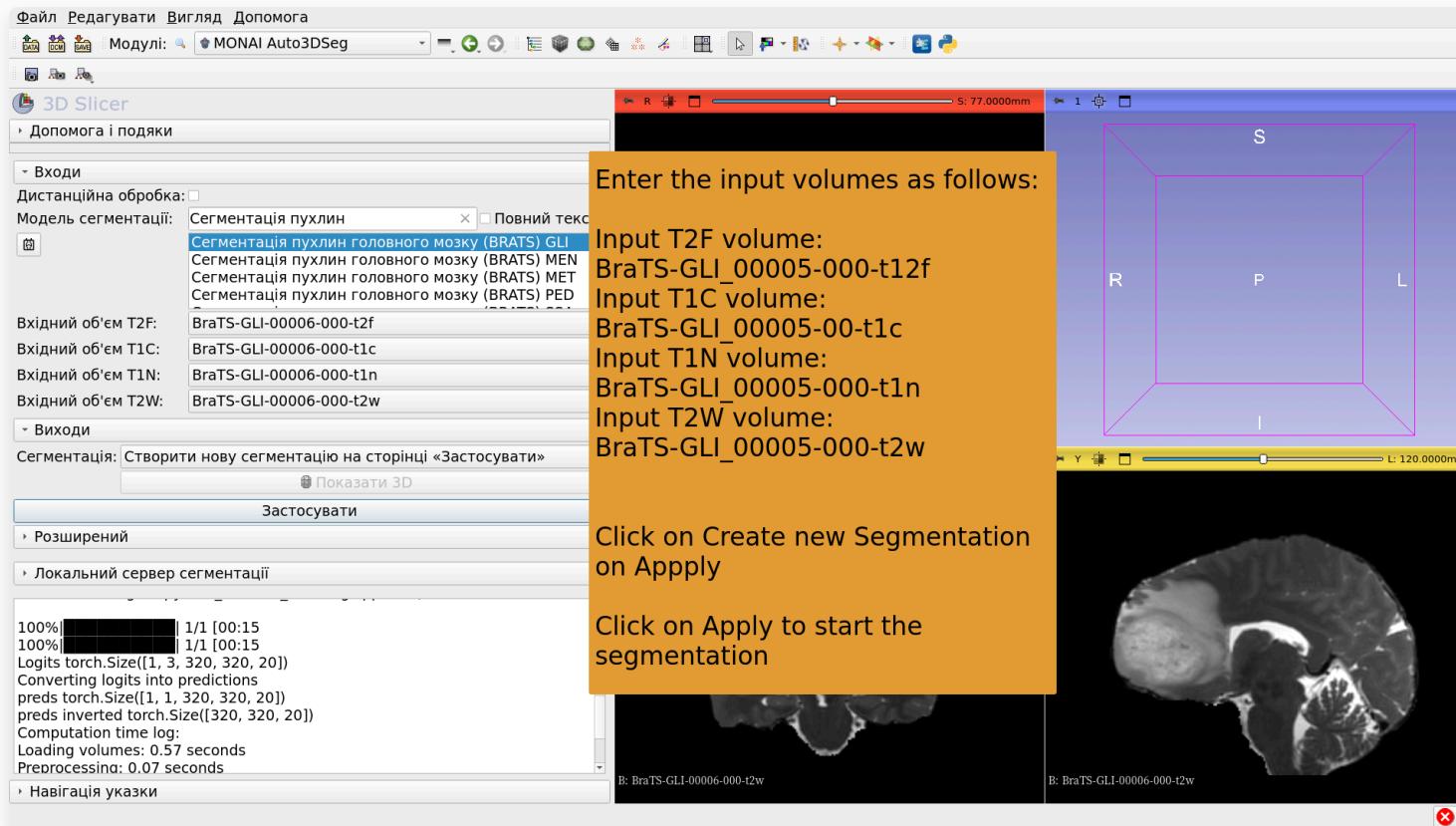

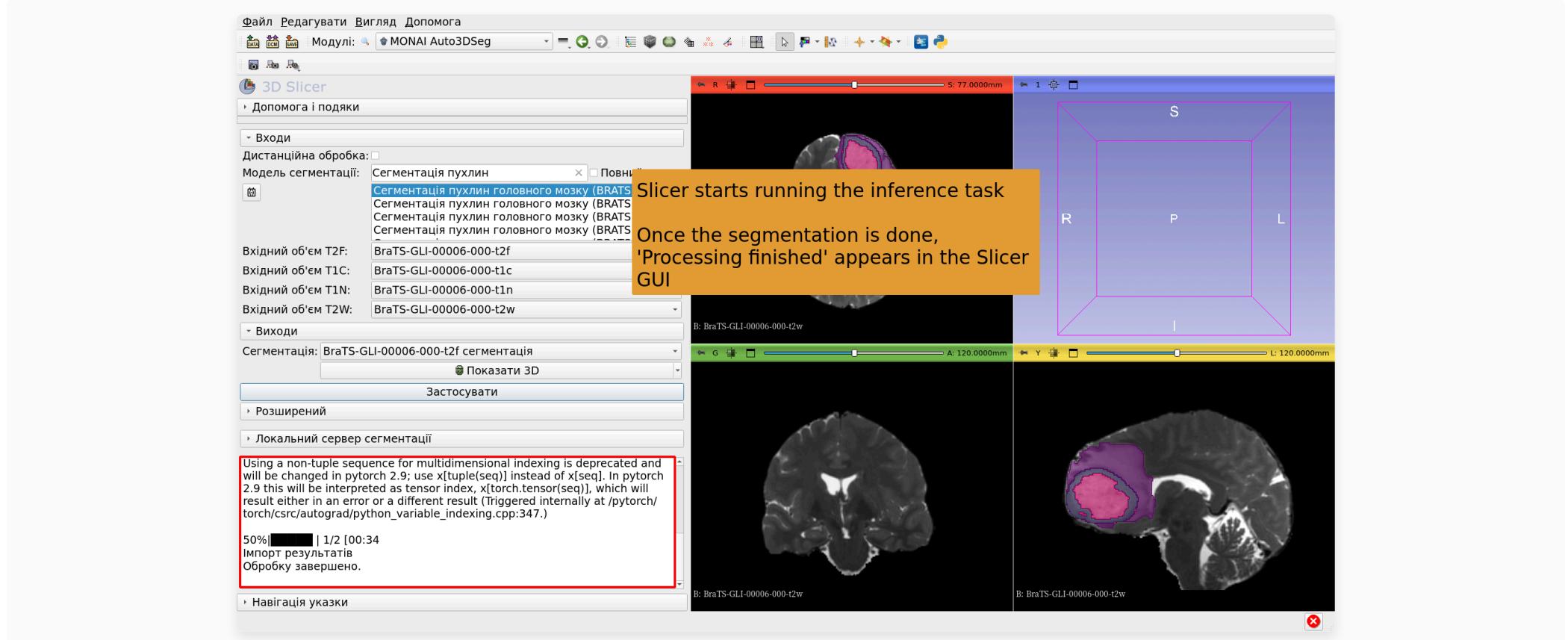

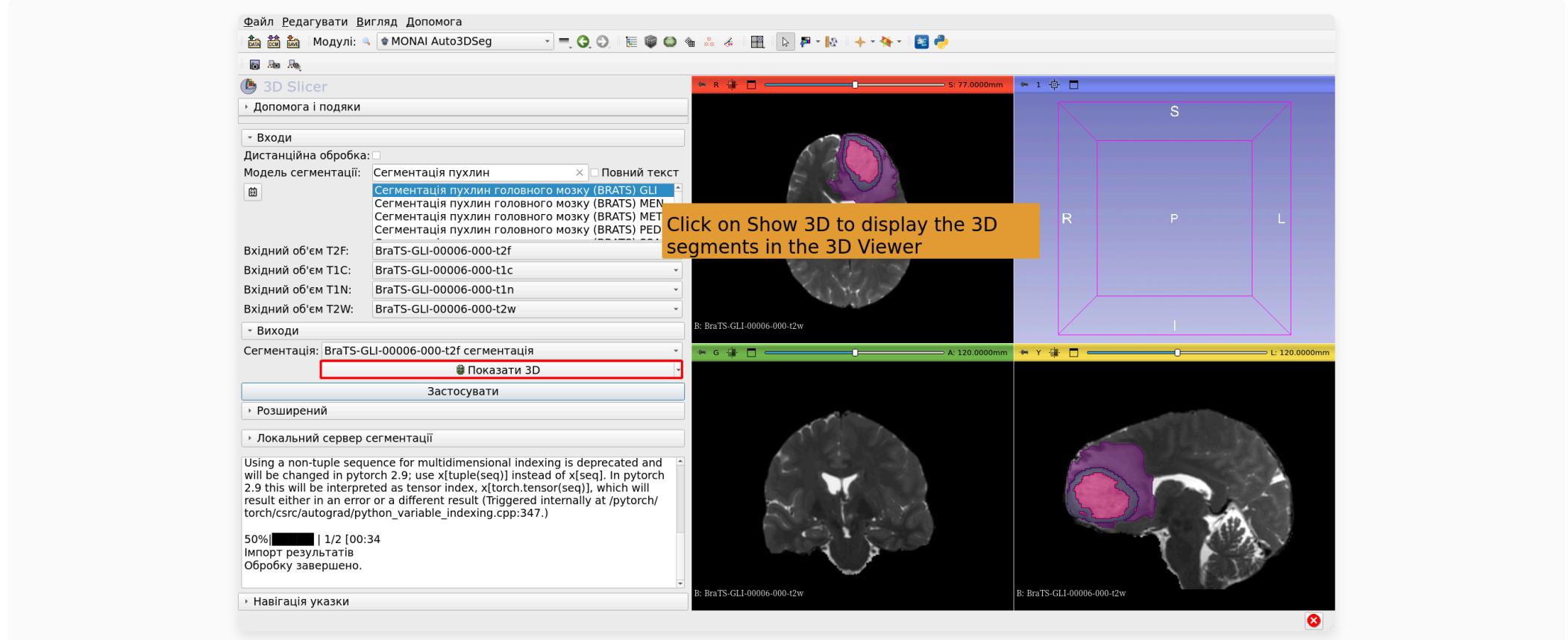


# AI Segmentation Task #3: Whole Body Segmentation


---


AI-based Segmentation of the whole body.


Dataset:

CT\_ThoraxAbdomen

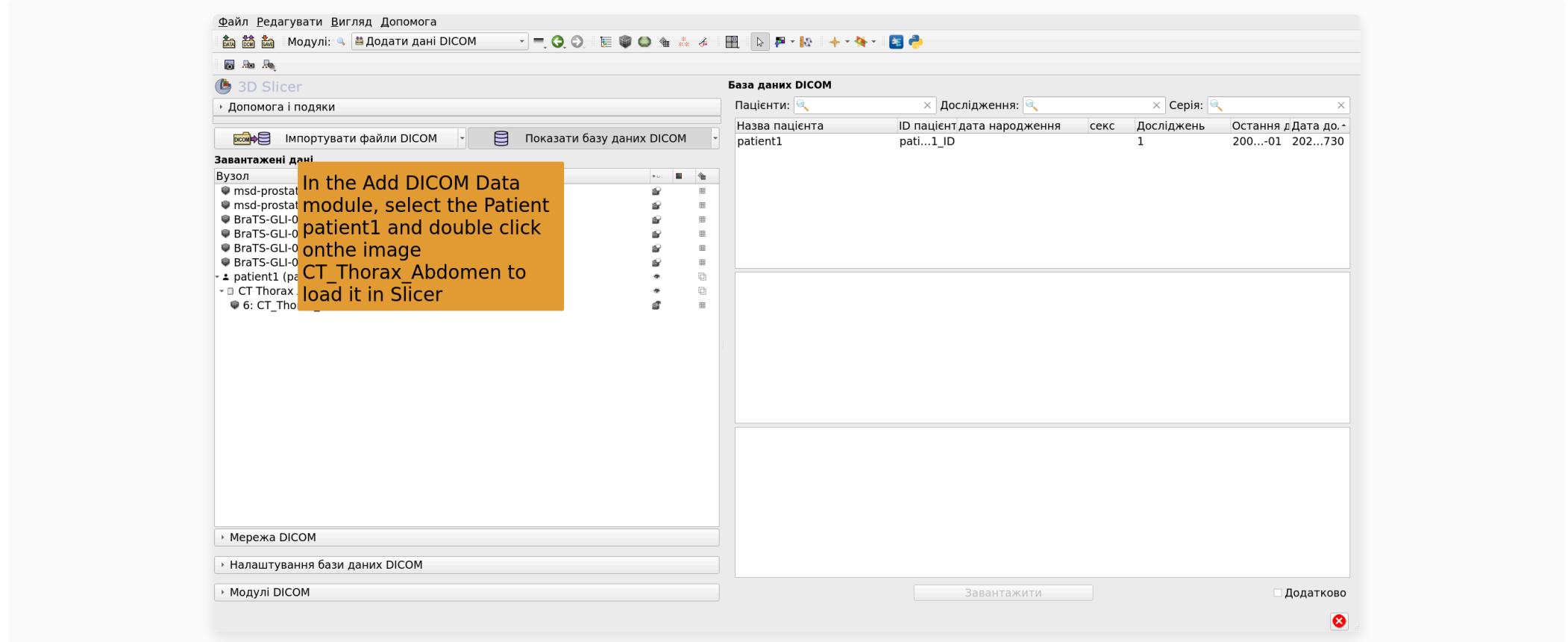

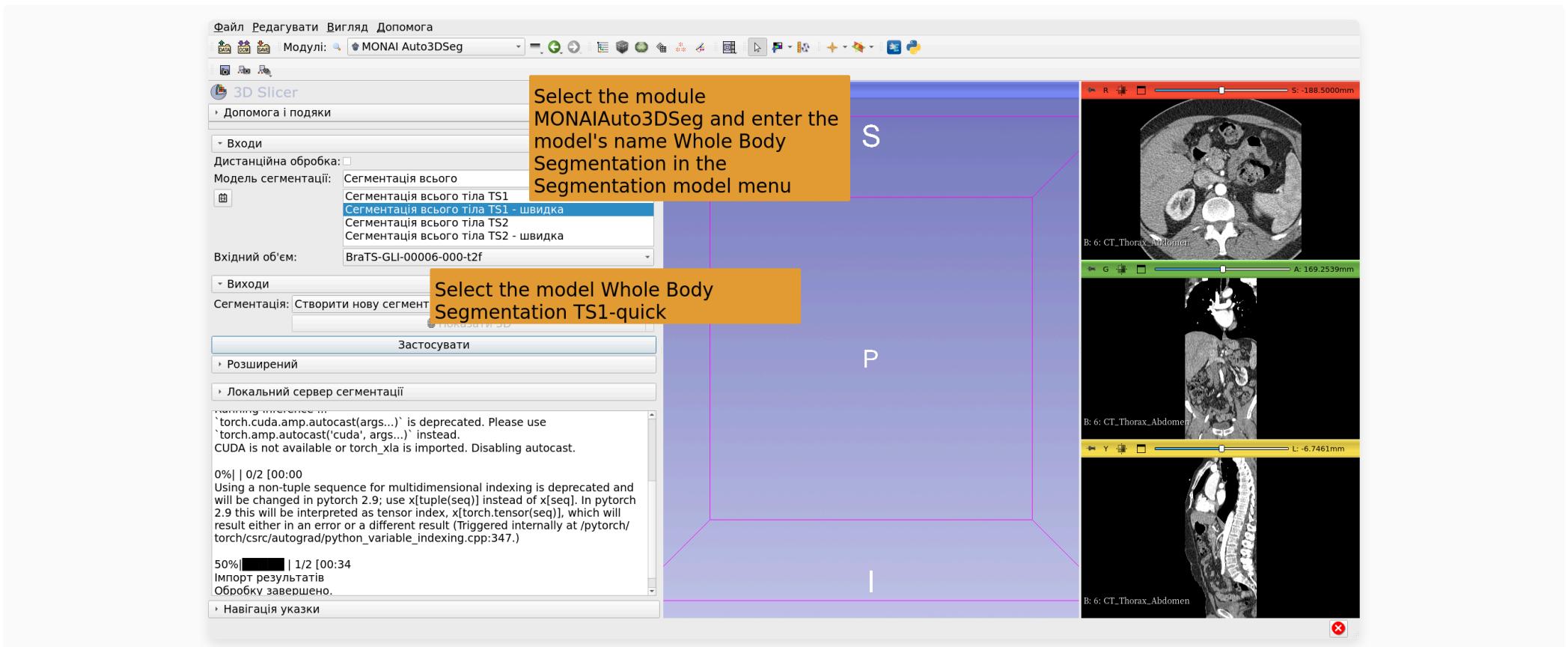

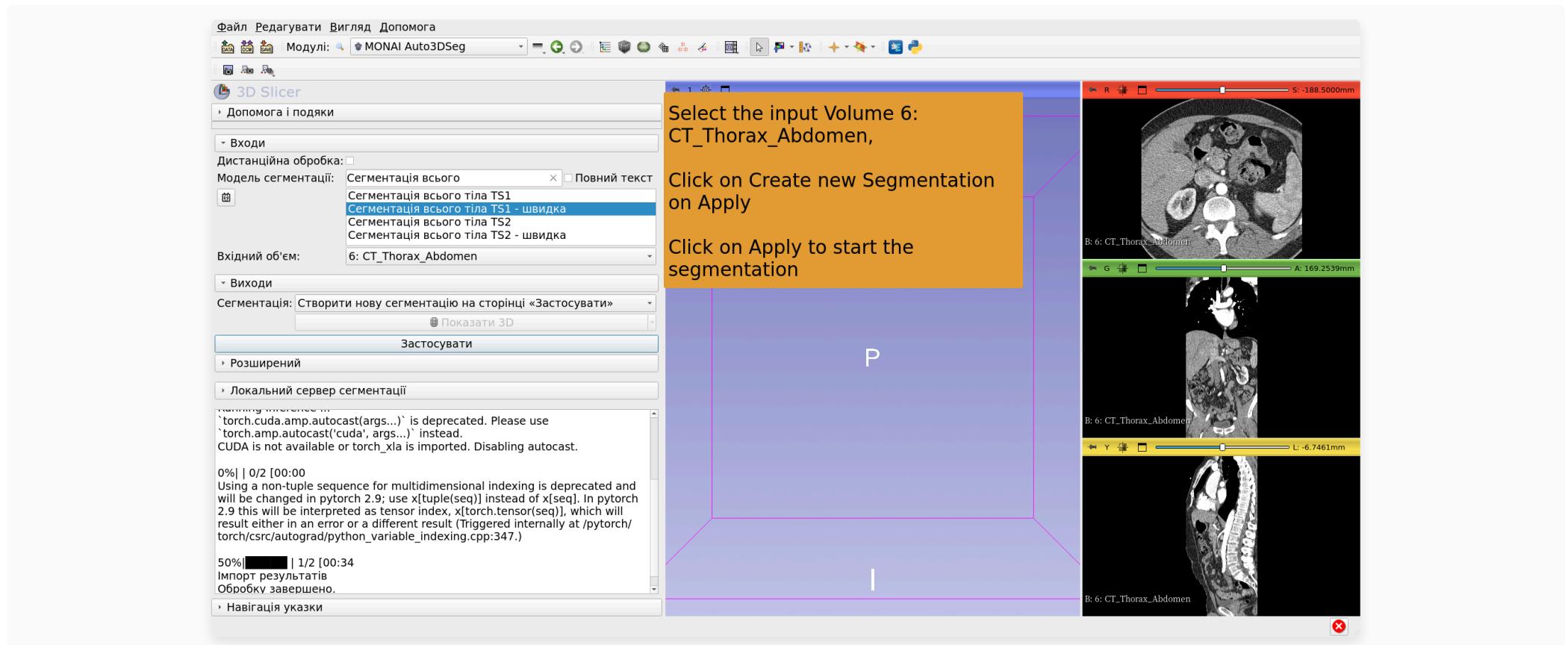

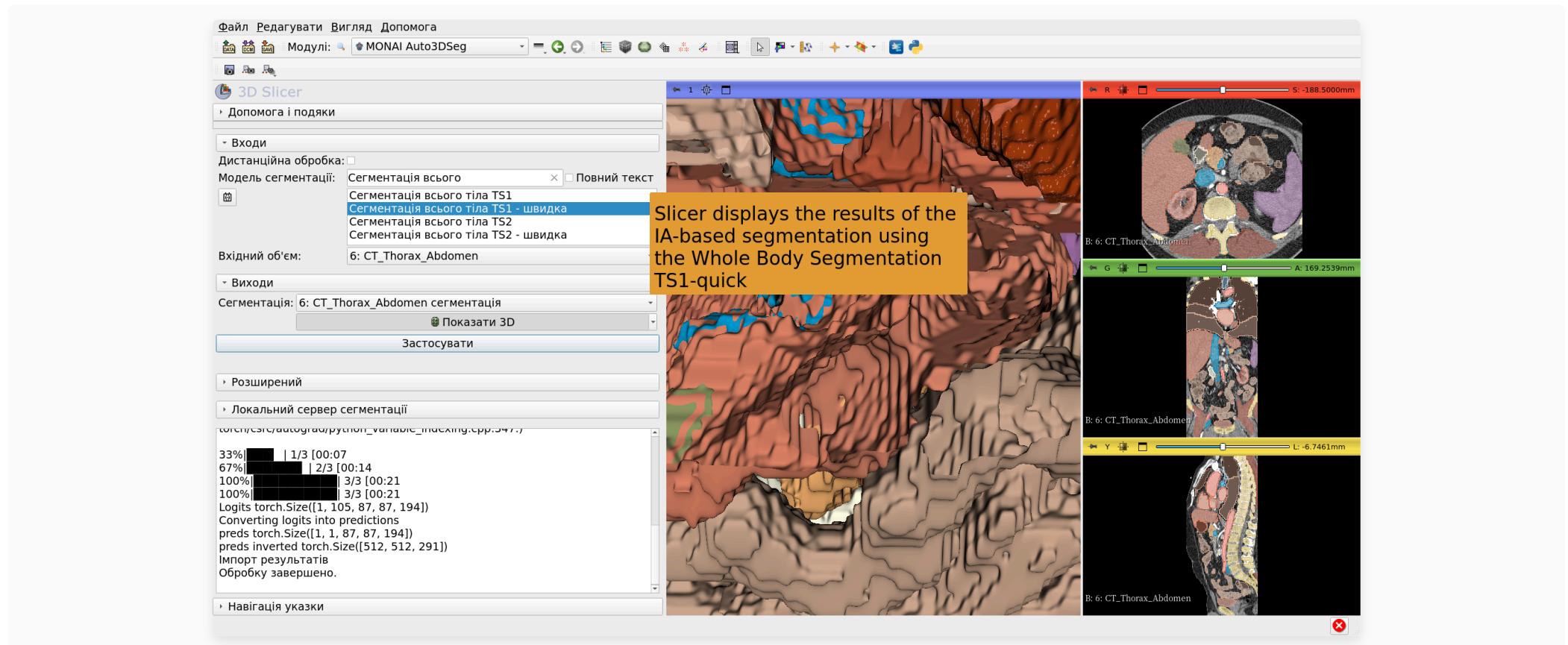

# Conclusion

---

The 3D SlicerMONAIAuto3DSeg extension provides fast AI-based segmentation of anatomical and pathological structures.

The module can run on standard laptop and desktop computers with no GPU.

# Подяки

---

The 3D Slicer internationalization project and the 3D Slicer for Latin America project have been made possible by two CZI Essential Open Source Software for Science (EOSS cycle 4 & 5) grants.